


Container

Zum Sterilisieren und Aufbewahren

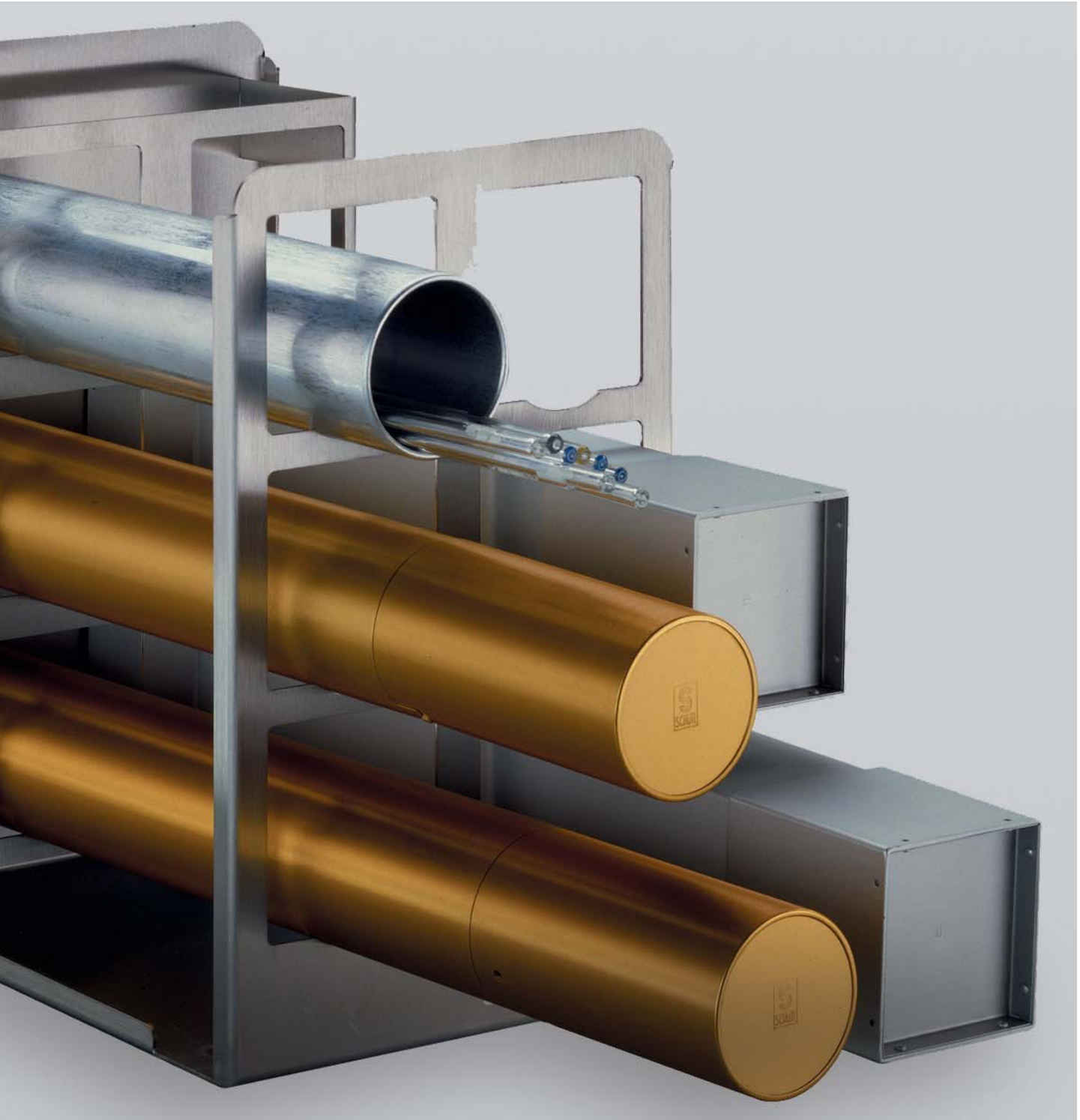

Sterilisieren und Aufbewahren

Container

Zum Sterilisieren und Aufbewahren von Pipetten, Pipettenspitzen, Gläsern u. a.

Sterilisiercontainer werden überall eingesetzt, wo Pipetten, Petrischalen, Pipettenspitzen, Reagenz- und Kulturgläser oder Kleinteile aus Glas oder Kunststoff sterilisiert bzw. steril aufbewahrt werden müssen.

Die Vielseitigkeit des Sterilisiercontainer-Programmes bietet auch für Ihren Anwendungsbereich eine ökonomisch sinnvolle Lösung.

UNICON

UNICON Universalcontainer



Zur Sterilisation und Aufbewahrung von Pipettenspitzen und allen weiteren Kleinteilen aus Glas oder Kunststoff, die sterilisiert oder steril aufbewahrt werden müssen.

UNICON sind rund und besitzen zur bequemen Benutzung einen Überfalldeckel, der beim Autoklavieren nur lose aufgesetzt werden darf. Sie sind aus Rein aluminium gefertigt.

UNICON 1

z.B. für Zentrifugengläser,

UNICON 2

z.B. für Reagenzgläser,

UNICON 3

z.B. zur Aufnahme von

Pipettenspitzen-Einsatzgestellen,

UNICON 4

z.B. für Kleinteile aus Glas oder Kunststoff.

Pipettenspitzen-Einsatzgestelle

Zum Einsatz in UNICON 3 gibt es verschiedene Einsatzgestelle zur Aufnahme von Pipettenspitzen, blau, gelb bzw. cristal.

Die Spitzen können nach dem Sterilisieren bequem mit den Pipetten entnommen werden.

Die Anordnung der Spitzen in den Einsatzgestellen erlaubt auch das Aufnehmen durch Mehrkanal-Pipetten.

VARICON

VARICON Variable Pipettencontainer



Diese preiswerten Pipettencontainer bestehen aus zwei ineinander zu schiebenden Aluminiumteilen.

Je nach Länge der Pipetten lässt sich der Deckel mehr oder weniger über den unteren Containerenteil schieben, so dass Pipetten unterschiedlicher Volumina sterilisiert und aufbewahrt werden können.

Das bedeutet, Sie benötigen nur eine Containergröße für alle Standardpipetten von 280 bis 420 mm Länge und nur eine Größe für alle Kurz- oder Pasteurpipetten von 145 bis 235 mm Länge.

GESTICON

GESTICON *Gestelle für Pipettencontainer*



Zur Aufnahme von runden
Pipettencontainern VARICON oder
quadratischen Containern bis
max. 65 x 65 mm.

Zur griffbereiten Aufbewahrung
von Pipetten verschiedener
Größen am Arbeitsplatz bzw. in
der Sicherheitswerkbank.

GESTICON gibt es in drei Ausführ-
ungen.

Die Edelstahl-Gestelle mit fester
Schräglage zur Aufnahme von
4, 6 oder 8 runden oder quadrati-
schen Pipettencontainern.


SILICON

SILICON *Silikoneinlagen*

Zum Einlegen in die Pipettencon-
tainer VARICON RS und RK.

Verhindert das Beschädigen der
Pipetten bei stoßartiger Belas-
tung, besteht aus 2 mm starkem
Silikongummi und ist sehr elas-
tisch.

SILICON hat einen Durchmesser
von 58 mm und passt bei
VARICON RS und RK in das
Unterteil.

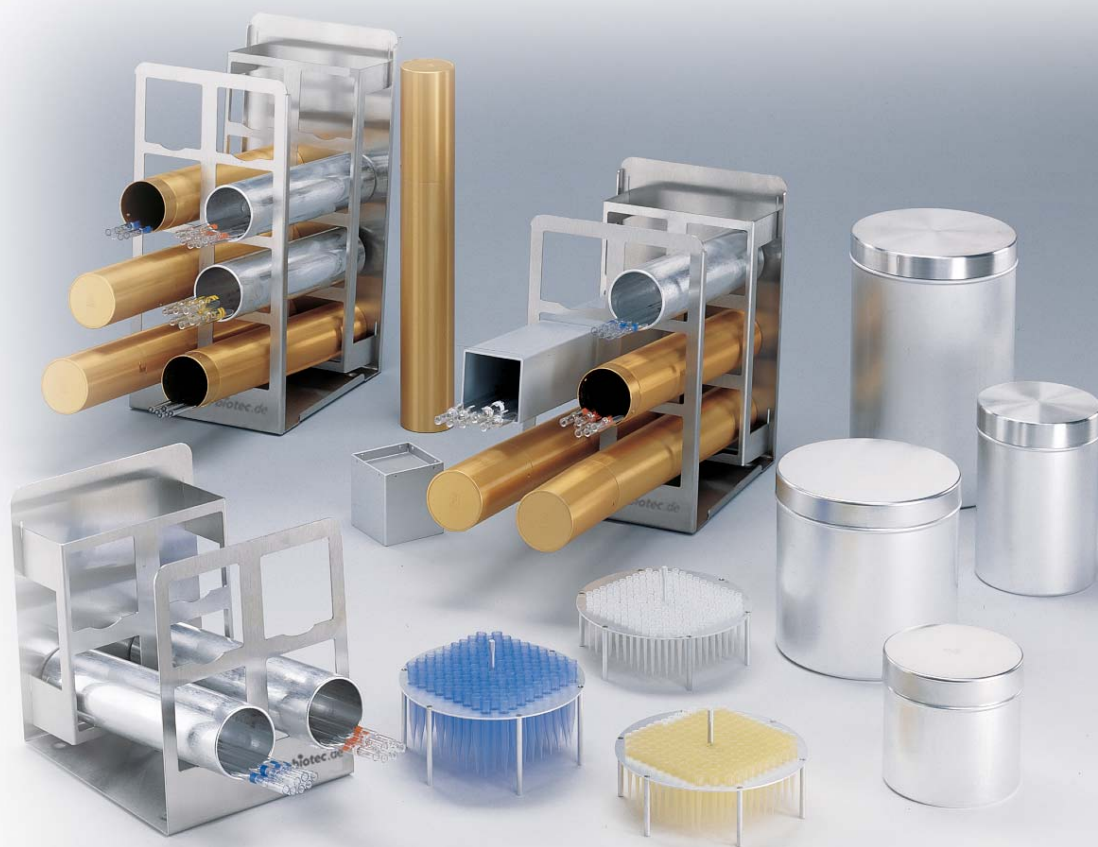

Technische Daten/Bestelldaten

Art.-Nr.

UNICON

UNICON 1	115 mm hoch	Ø 120 mm	3.526 113
UNICON 2	175 mm hoch	Ø 120 mm	3.526 173
UNICON 3	170 mm hoch	Ø 170 mm	3.526 183
UNICON 4	270 mm hoch	Ø 170 mm	3.526 273

Pipettenspitzen-Einsatzgestell

Einsatzgestell b	für 116 blaue Pipettenspitzen	3.527 013
Einsatzgestell g	für 208 gelbe Pipettenspitzen	3.527 023
Einsatzgestell c	für 208 cristal Pipettenspitzen	3.527 033

VARICON

VARICON RK	145-235 mm lang (verschiebbar)	Ø 60 mm	3.521 233
VARICON RS	280-420 mm lang (verschiebbar)	Ø 60 mm	3.521 423

GESTICON

GESTICON E4	195 x 229 x 235 mm (B x H x T)	Edelstahl	3.524 042
GESTICON E6	195 x 315 x 235 mm (B x H x T)	Edelstahl	3.524 062
GESTICON E8	195 x 405 x 235 mm (B x H x T)	Edelstahl	3.524 182

SILICON

SILICON	2 mm hoch	Ø 58 mm	3.523 213
---------	-----------	---------	-----------

schuett[•]biotec.de

Rudolf-Wissell-Straße 13, D-37079 Göttingen, Germany

Fon +49 (0) 551/5 04 10-0, Fax +49 (0) 551/5 04 10-99

info@schuett-biotec.de

www.schuett-biotec.de